

# ARNOMED DISPENSER ABS



## Desinfektionsspender aus ABS-Kunststoff

ABS plastic disinfectant dispenser

### Produktbeschreibung

Product Description

Desinfektionsmittel- und Seifenspender zur hygienischen Händedesinfektion mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff und variabler Dosierungsfunktion. Der Spender ist kompatibel mit herkömmlichen 500ml oder 1000ml Euroflaschen, nachfüllbar und wird mit Armhebel und integrierter Tropfschale geliefert.

*Disinfectant and soap dispenser for hygienic hand disinfection made of ABS plastic with a variable dosage function. The dispenser is compatible with conventional 500ml or 1000ml Euro bottles, refillable and comes with arm lever and integrated drip tray.*

### Bemerkungen

Remarks

Der Desinfektionsspender kann mit Desinfektionsmittel und -gel, Flüssigseifen sowie dünnflüssigen Lotionen befüllt und an der Wand oder freistehend genutzt werden. Er eignet sich für medizinische Einrichtungen, die Industrie, insb. Lebensmittelbranche, öffentliche Einrichtungen und den privaten Gebrauch.

*The disinfectant dispenser can be filled with disinfectant and disinfectant gel, liquid soaps and thin lotions and can be used on the wall or free-standing. It is suitable for medical facilities, industry, esp. food industry, public facilities and private use.*

### Ausführungen

Variations


Art.-Nr. Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Article Description	Passend für Suitable for	Maße Dimensions	Abschließbar Lockable	Farbe Color	Verpackungseinheit Packaging unit
522-1000	ARNOMED DISPENSER   ABS 1000	1000ml	15,5 x 35 x 21,5cm	Nein No	Weiß White	1 Stk./Box, 16 Boxen/Krt. 1 pcs/box   16 boxes/crt
522-500	ARNOMED DISPENSER   ABS 500	500ml	15,7 x 29 x 19,6cm	Ja Yes	Weiß White	1 Stk./Box, 16 Boxen/Krt. 1 pcs/box   16 boxes/crt

### Lieferumfang

Scope of delivery

Desinfektionsspender, Dosierpumpe, Schrauben, Dübel, Rückwand zur Befestigung, 500/1000 ml Euro-Flasche, Tropfschale, Bedienungsanleitung & Schlüssel (für 500ml-Variante)

*Disinfection dispenser, dosing pump, screws, dowels, back plate for mounting, 500/1000 ml Euro bottle, drip tray, operating instructions & key (for 500ml variant).*

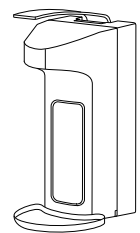

**Sicherheitshinweise***Safety instructions*

Empfohlene Höhe des Spenders: 120cm. Prüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit und stellen Sie sicher, dass die Wand für Kunststoffdübel geeignet ist. Berücksichtigen Sie, dass der Spender zur Verwendung und Nachbefüllung gut zugänglich sein muss. Oberhalb des Spenders sollten mind. 15cm Platz sein, um den Spender auf die Wandhalterung zu schieben. Unterhalb des Spenders sollten mind. 20cm Platz gelassen werden.

*Recommended height of the dispenser: 120cm. Before mounting, check the condition of the wall and make sure that it is suitable for plastic anchors. Keep in mind that the dispenser must be easily accessible for use and refilling. There should be at least 15cm of space above the dispenser to slide the dispenser onto the wall bracket. At least 20cm of space should be left below the dispenser.*

**Letzte Änderungen***Last Changes*

16.10.2024

